

Silk'n®

Beautiful Technology

FLASH&Go FREEDOM

تعليمات الاستخدام 



تحتفظ Home Skinovations Ltd. بحق إدخال تغييرات على منتجاتها أو مواصفاتها بغية تحسين الأداء، الموثوقية أو الإنتاجية. يُعتد أن المعلومات المزودة من قبل Home Skinovations Ltd. هي دقيقة وموثوقة عند النشر. ولكن، لا تأخذ Home Skinovations Ltd. على عاتقها أي مسؤولية عن استخدامها. لا يتم منح أي ترخيص بموجب إيجاه منها أو بطريقة أخرى من خلال أي براءة اختراع أو حقوق براءة اختراع خاصة بـ Home Skinovations Ltd.

لا يجوز استساح أي جزء من هذا المستند أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة، إلكترونية أو ميكانيكية، لأي غرض كان، دون الحصول على إذن خطي واضح من قبل Home Skinovations Ltd.

اليانات عرضة للتغيير من دون أي إشعار.

توجد لدى Home Skinovations Ltd. براءات اختراع ومطالبات براءات اختراع قيد البحث، علامات تجارية، حقوق نشر، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية تغطي موضوع هذا المستند. لا يمكنك توفير هذه الوثيقة أي ترخيص لهذه براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في أي اتفاق خطي من قبل Home Skinovations Ltd.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.co.il, contact@silkn.co.il

الفهرس

٢. ١. قبل أن تبدأي.....
٢. ١.١. وصف جهاز™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
٢. ١.٢. محتوى الرزمة.....
٢. ١.٣. خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال.....
٤. ٢. الاستخدام المعدّل™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
٤. ٣. الأمان مع™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
٥. ٤. موانع الاستعمال.....
٧. ٥. لا تستخدمي™ Silk'n Flash&Go Freedom إذا:.....
٨. ٦. تجنبتي استخدام™ Silk'n Flash&Go Freedom في حل كان ينطبق أي مما يلي:.....
١٠. ٧. الأعراض الجانبية المحتملة الناجمة عن استخدام™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
١١. ٨. إزالة الشعر للمدى البعيد بطريقة™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
١١. ٩. ابدأي!.....
١١. ٩.١. ما الذي يمكن توقعه عند العلاج بواسطة™ Silk'n Flash&Go Freedom؟.....
١٥. ٩.٢. بعد العلاج بواسطة™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
١٥. ١٠. صيانة™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
١٥. ١٠.١. تنظيف™ Silk'n Flash&Go Freedom.....
٣٥. ١٠.٢. استبدال خرطوشة المصباح.....
١٥. ١١. اكتشاف المشاكل وحلها.....
١٦. ١١.١. "جهاز™ Silk'n Flash&Go Freedom لا يبدأ التشغيل".....
١٦. ١١.٢. "لا يتم إطلاق نبضة ضوء عندما أضغط على مفتاح النبض".....
١٦. ١٢. خدمة العملاء.....
١٧. ١٣. المواصفات.....

١. قبل أن تبدأي

قبل أن تستخدمي Silk'n Flash&Go Freedom™ للمرة الأولى، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بأكمله. أعط اهتمامًا خاصًا للأقسام حول إجراءات استخدام الجهاز، تشغيل الجهاز، وإجراءات ما بعد الاستخدام. إننا نوصي بأن تراجعى بشكل جيد دليل المستخدم هذا قبل كل مرة تستخدمين فيها Silk'n Flash&Go Freedom™. إن Silk'n Flash&Go Freedom™ هو جهاز كهربائي قوي. بوصفه كذلك، يجب استخدامه مع إغارة انتباه خاص للآمان.

يرجى قراءة جميع التحذيرات واحتياطات الأمان قبل الاستخدام، وتتبعها بدقة عند استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™

١. قبل أن تبدأي

Silk'n Flash&Go Freedom™ هو جهاز يستند إلى الضوء للتفليس من الشعر بشكل دائم صُمم للاستخدام المنزلي.

١.١ وصف جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™

يتكون جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™ من وحدة لإزالة الشعر مع لوحة تحكم وخرطوشة مصباح وحيدة الاستعمال.

يمكنك أن تجدي على مقبض وحدة إزالة الشعر الخاصة ب Silk'n Flash&Go Freedom™ زر النبض. خرطوشة المصباح وحيدة الاستعمال موجودة في طرف وحدة إزالة الشعر.

١.٢ محتوى الرزمة

ستجدين عندما تفتحين رزمة Silk'n Flash&Go Freedom™ الأجزاء التالية:

■ وحدة إزالة الشعر لـ Silk'n Flash&Go Freedom™

■ محوّل يركّب على الحائط

■ دليل المستخدم هذا

■ قرص DVD إرشادي

١.٣ خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال

لمعلوماتك - تحتاج سلسلة من علاجات الجسم الكامل نموذجيًا 7,000 – 10,000 نبضة ضوء. بالإضافة إلى خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال العادية التي تفي بجميع الأغراض، تتوفر أيضًا خرطوشة مصباح وحيدة الاستعمال مخصصة للوجه.

إن نوع خراطيش المصباح الوحيدة الاستعمال المتضمنة بجهازك، وعدد نبضات الضوء فيها، محددان على زرمة Silk'n Flash&Go Freedom™ الخاص بك.



- ① ضوء مؤشر الاستعداد
- ② ضوء مؤشر الطاقة مشغلة
- ③ أزرار ضبط مستوى الطاقة
- ④ أضواء مؤشر مستوى الطاقة
- ⑤ ضوء مؤشر استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال
- ⑥ ضوء مؤشر تحذير النظام
- ⑦ ضوء مؤشر تحذير درجة لون البشرة

- ① وحدة إزالة الشعر
- ② لوحة التحكم
- ③ زر التشغيل
- ④ خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال
- ⑤ مستشعر لون البشرة
- ⑥ سطح العلاج
- ⑦ لوحة التحكم
- ⑧ مفتاح التشغيل/ الاستعداد

٢. الاستخدام المعدّل لـ Silk'n Flash&Go Freedom™

إن Silk'n Flash&Go Freedom™ معدّ لإزالة الشعر غير المرغوب به. Silk'n Flash&Go Freedom™ معدّ أيضاً للتأثير الطويل الأمد أو الدائم على التقليل من الشعر. يُعرّف لتقليل الشعر الدائم كتقليل ثابت على المدى البعيد في كمية الشعر التي تنمو من جديد بعد برنامج العلاج.

من الممكن استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ لإزالة الشعر غير المرغوب به عن الجسم. تشمل مناطق الجسم المثالية لاستعمال Silk'n Flash&Go Freedom™ الإبطين، خط البيكينى، الذراعين، الساقين، الوجه، الظهر، الكتفين والصدر.

٣. الأمان مع Silk'n Flash&Go Freedom™

الأمان يأتي أولاً مع Silk'n Flash&Go Freedom™. تقنية HPL™ في Silk'n Flash&Go Freedom™ - أمان فائق مع مستوى طاقة منخفض تقنية Light™ Home Pulsed Light قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأمد لإزالة الشعر من خلال جزء صغير من مستوى الطاقة المستخدمة في معدات إزالة الشعر الأخرى المستندة إلى الضوء. تقلل الطاقة المنخفضة المستخدمة في Silk'n Flash&Go Freedom™ من إمكانية أن تحدث الضرر أو المضاعفات، وتسهم في أمانك بشكل عام.

تقنية Home Pulsed Light™ قادرة على تحقيق نتائج طويلة الأمد لإزالة الشعر من خلال جزء صغير من مستوى الطاقة المستخدمة في معدات إزالة الشعر الأخرى المستندة إلى الضوء. تقلل الطاقة المنخفضة المستخدمة في Silk'n Flash&Go Freedom™ من إمكانية أن تحدث الضرر أو المضاعفات، وتسهم في أمانك بشكل عام.

Silk'n Flash&Go Freedom™ يحمي بشرتك

لا تلائم إزالة الشعر التي تستند إلى الضوء لون البشرة الداكن بشكل طبيعي أو البشرة المسفعة. يأتي Silk'n Flash&Go Freedom™ مع جهاز متضمن لاستشعار لون البشرة تم تصميمه لقياس لون بشرة السطح الخاضع للعلاج ولا يتيح التطبيق إلا على ألوان البشرة المناسبة. لا تسمح لك ميزة الأمان الفريدة هذه علاج الموقع الداكن جداً أو المسفّع جداً من بشرتك. علاوة على ذلك، فإن سطح العلاج الذي يصل بعدها إلى 1,3 × 3 سم² والذي يتم من خلاله إطلاق نبضات الضوء، مثبت داخل خرطوشة المصباح. يتيح هذا لـ Silk'n Flash&Go Freedom™ حماية بشرتك عن طريق تجنب الاتصال المباشر بين سطح العلاج والبشرة.

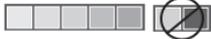
Silk'n Flash&Go Freedom™ يحمي عينيك

يحتوي Silk'n Flash&Go Freedom™ على ميزة متضمنة لحماية العينين. لقد تم تصميمه بحيث لا يمكنه إطلاق نبضة الضوء في الوقت الذي يواجه فيه سطح العلاج الهواء الطلق. لا يتيح مفتاح الأمان العلاج إلا عندما يكون سطح العلاج يلامس النسيج

٤. موانع الاستعمال

معلومات هامة حول الأمان - للقراءة قبل الاستعمال!

إن Silk'n Flash&Go Freedom™ ليس معداً لكل شخص. يرجى قراءة المعلومات الواردة في هذا القسم والتفكير بها قبل الاستخدام. للمزيد من المعلومات والاستشارة الشخصية يمكنك أيضاً زيارة www.silkn.com أو حجز Silk'n Flash&Go™ Freedom المحلي.

تحذير	النتائج المحتملة	نصيحة أمان
<p>لا تستخدمي Silk'n™ Flash&Go Freedom على البشرة الداكنة طبيعيًا!</p> <p>غير آمن</p>  <p>أنظري مخطط لون البشرة في الغلاف الداخلي.</p>	<p>يمكن أن يؤدي علاج البشرة الداكنة بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™ إلى أعراض ضائرة مثل الاحمرار وإزعاج في الجلد.</p>	<p>تم تضمين مستشعر فريد ل لون البشرة في Silk'n Flash&Go Freedom™ لقياس لون البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وأحياناً أثناء الجلسة. يضمن مستشعر لون البشرة أنه لن يتم إطلاق نبضات إلا على لون البشرة المناسب.</p>
<p>تجنبني التعرض للشمس لمدة ٤ أسابيع قبل علاجك بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™!</p> <p>يشمل التعرض لأشعة الشمس التعرض غير المحمي لأشعة الشمس المباشرة لأكثر من ١٥ دقيقة بشكل متواصل، التعرض غير المحمي لأشعة الشمس المنتشرة لأكثر من ساعة بشكل متواصل. لحماية البشرة التي تمت معالجتها مؤخرًا عند التعرض لأشعة الشمس، تأكدي من وضع واقي الشمس ذي عامل حماية (SPF ٣٠) أو أعلى، لمدة أسبوعين بعد كل</p>	<p>من الممكن أن يؤدي العلاج بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™ قبل أو بعد التعرض إلى الشمس إلى أعراض ضائرة مثل الاحمرار وإزعاج الجلد. تحتوي البشرة المسفعة، وخاصة في أعقاب التعرض للشمس، على كميات كبيرة من صبغ الميلانين.</p> <p>جميع أنواع الجلد واللون البشرات، بما فيها تلك التي تبدو بأنها لا تتسفع بسرعة. إن وجود كميات كبيرة من الميلانين تُعرض البشرة إلى خطر مرتفع عند استعمال أي طريقة تستند إلى الضوء لإزالة الشعر.</p>	<p>تم تضمين مستشعر فريد ل لون البشرة في Silk'n Flash&Go Freedom™ لقياس لون البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وأحياناً أثناء الجلسة. يضمن مستشعر لون البشرة أنه لن يتم إطلاق نبضات إلا على لون البشرة المناسب.</p>

تحذير	النتائج المحتملة	نصيحة أمان
لا تستخدمى Silk'n Flash&Go Freedom™ على البشرة الداكنة طبيعيًا! أنظري مخطط لون البشرة في الغلاف الداخلي.	يمكن أن يؤدي علاج البشرة الداكنة بواسطة Silk'n Flash&Go™ Freedom إلى أعراض ضائرة مثل الاحمرار وإزعاج في الجلد.	تم تضمين مستشعر فريد للون البشرة في Silk'n Flash&Go Freedom™ لقياس لون البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وأحيانًا أثناء الجلسة. يضمن مستشعر لون البشرة أنه لن يتم إطلاق نبضات إلا على لون البشرة المناسب.
لا تستخدمى Silk'n Flash&Go™ أبدًا Freedom حول العينين أو بقربهما.	على الرغم من أنه يمكن استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ لعلاج شعر الوجه، يجب توخي الحذر عند الاستخدام على الوجه لتجنب العينين.	يحتوي Silk'n Flash&Go Freedom™ على ميزة متضمنة لحماية العينين. لقد تم تصميمه بحيث لا يمكنه إطلاق نبضة الضوء في الوقت الذي يواجه في سطح العلاج الهواء الطلق. لا يتيح مفتاح الأمان العلاج إلا عندما يكون سطح العلاج يلامس نسيجًا.
لا تعالجي الوشم أو الماكياج الدائم، البقع البنية الداكنة أو السوداء، (مثل بقع الشمس الواسعة، علامات الولادة، الشامات أو التآليل)، الحلمات، الأعضاء التناسلية أو الشفاه.	يمكن أن يؤدي العلاج بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™ لأي منطقة مظلمة من ناحية لونها أو فيها كمية أكبر من الصباغ إلى أعراض ضائرة مثل الحروق، الحوصلات، وتغيرات في لون الجلد (فرط أو نقص تصبغ).	قومي بتغطية المنطقة بمواد لا تمتص الضوء مثل القماش الأبيض أو شريط لاصق طبي أبيض.
لا تعالجي إكزيمة نشطة، صدفية، آفات، جروح مفتوحة أو عداوى (فروخ البرد)، حالات الجلد غير الطبيعية الناجمة عن أمراض جهازية أو أيضا (المسكري مثلا).	يمكن للعلاجات المستندة إلى الضوء أن تسبب ردود فعل ضائرة في المناطق الحساسة.	انتظري حتى تشفى المناطق المصابة قبل استعمال Silk'n Flash&Go Freedom™.
منطقة علاج لديها تاريخ من اندلاع الهربس.	يمكن للعلاجات المستندة إلى الضوء أن تسبب ردود فعل ضائرة في المناطق الحساسة.	قومي باستشارة طبيبك لتلقي علاج واق قبل استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™.
لا تعالجي بواسطة Silk'n Flash&Go™ Freedom إذا كنت حاملا.	من الممكن أن تزيد التغيرات الهرمونية من حساسية الجلد ومن خطر الأعراض الضائرة.	
لا تعالجي المناطق التي قد ترغبين في نمو الشعر فيها.	النتائج هي دائمة.	

تحذير	النتائج المحتملة	نصيحة أمان
أبقى Silk'n Flash&Go Freedom™ بعيداً عن الماء! لا تضعي أو تخزني Silk'n Flash&Go Freedom™ في مكان يمكنه أن يسقط أو أن يُدفع منه أو يوضع في حوض الاستحمام، المغسلة أو أي وعاء آخر يحتوي على الماء.	من شأن ذلك أن يؤدي إلى صعقة كهربائية.	لا تستخدمي Silk'n Flash&Go Freedom™ خلال الاستحمام أو إذا أصبح رطباً أو مبللاً. قومي بفضله عن الكهرباء في الحال إذا سقط في الماء.
لا تحاولي فتح أو تصليح جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™.	من الممكن أن يعرضك فتح Silk'n Flash&Go Freedom™ لمكونات كهربائية خطيرة ولطاقة ضوئية نابضة؛ يمكن بسبب كليهما ضرراً جسدياً بالغاً و/ أو إصابة دائمة في العينين. من الممكن أن يؤدي ذلك أيضاً إلى تضرر جهازك وسيؤدي إلى إبطال الكفالة.	يرجى الاتصال بخدمة عملاء Silk'n Flash&Go Freedom™ إذا كان لديك جهاز مكسوراً أو تالفاً يحتاج إلى إصلاح.

٥. لا تستخدمي Silk'n Flash&Go Freedom™ إذا:

إذا كانت خرطومشة المصباح الوحيدة الإستعمال متضررة، أو إذا كان سطح العلاج مشققاً، متشظي أو مفقوداً.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.
المرفقات أو الملحقات لا توصي بها Home Skinovations Ltd.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.
فيه سلك أو قابس تالف.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.
ترين أو تشمين دخاناً عند استعماله.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.
إنه لا يعمل بشكل سليم أو أنه يظهر بأنه تالف.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.
مستشعر لون البشرة مشقق أو مكسور.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.
الغلاف الخارجي مشقق أو أخذ بالتفكك.	توقفي عن الإستعمال في الحال واتصلي بخدمة عملاء Silk'n™.

٦. تفادي استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ إذا انطبق أي مما يلي

اتصلي بطبيبك قبل استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™.	تاريخ من تشكل ندب جدي.
	إذا كنت تعاني من الصرع.
	إذا كان لديك مرض يرتبط بتحسس الضوء، مثل البرفيرية، الطفح الخفيف متعدد الأشكال، الشرى الشمسي، الذئبة، إلخ.
اتصلي بطبيبك قبل استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™.	إذا كان لديك تاريخ من سرطان الجلد أو مناطق يحتمل تعرضها لأورام جلدية خبيثة.
	إذا كان لديك تاريخ من سرطان الجلد أو مناطق يحتمل تعرضها لأورام جلدية خبيثة.
	إذا كنت قد تلقيت معالجة بالإشعاع أو علاجات كيميائية خلال الأشهر الثلاث الماضية.
	إذا كانت لديك أي حالة أخرى من شأنها أن تجعل علاجك غير آمن، وفق رأي طبيبك.
	إذا كان يتم علاج بشرتك بدواء يصفه الطبيب في غضون الأشهر الـ ٦ الماضية، يرجى استشارة طبيبك المعالج.

٧. الأعراض الجانبية المحتملة الناجمة عن استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™

عندما يستخدم Silk'n Flash&Go Freedom™ طبقاً للتعليمات، تكون الأعراض الجانبية والمضاعفات المرتبطة باستخدامه غير شائعة. إلا أن جميع الإجراءات التجميلية، بما في ذلك تلك المصممة للاستخدام المنزلي، تنطوي على قدر من المخاطر. لذلك، فمن الأهمية بمكان أن تفهمي وأن تقبلي المخاطر والمضاعفات التي يمكن أن تحدث مع أنظمة إزالة الشعر بواسطة الضوء النابض المصممة للاستخدام المنزلي.

إزالة الشعر بالليزر أو مصادر الأشعة قد تؤدي إلى زيادة وتيرة نمو الشعر لدى بعض الأشخاص. بحسب المعطيات المتوفرة حالياً، المجموعة الأكثر تعرضاً لهذا الأمر هن نساء حوض البحر الابيض المتوسط، الشرق الاوسط وجنوب آسيا في مناطق الوجه والرقبة.

درجة الخطر	رد الفعل الضائر
طفيف	<p>إزعاج طفيف في الجلد - على الرغم من أنه يمكن عامة تحمل إزالة الشعر بواسطة الضوء النابض في المنزل بشكل جيد، إلا أن معظم المستخدمين يشعرون ببعض الإزعاج الطفيف أثناء الاستخدام، وعادة ما يوصف بأنه إحساس بوخز طفيف في مناطق الجلد المعالجة. عادة ما يستمر الإحساس بالوخز خلال فترة التطبيق نفسها أو ليضع دقائق بعد ذلك.</p> <p>أي شيء يتعدى هذا الإزعاج الطفيف هو أمر غير طبيعي ويعني إما أنه لا يتعين عليك الاستمرار في استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ لأنك غير قادرة على تحمل تطبيق إزالة الشعر، أو أن ضبط مستوى الطاقة مرتفع جدًا.</p>
طفيف	<p>احمرار البشرة - من الممكن أن تصبح بشرتك حمراء مباشرة بعد استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ أو خلال ٢٤ ساعة من استخدامه. عادة ما يتبدد الاحمرار خلال ٢٤ ساعة. راجعي طبيبك إذا لم يختفي الاحمرار خلال يومين حتى ثلاثة أيام.</p>
طفيف	<p>حساسية زائدة في الجلد - إن البشرة في المنطقة المعالجة هي أكثر حساسية لذلك من الممكن أن تعاني من جفاف أو تقشر في البشرة.</p>
نادر	<p>تغييرات التصبغ - يستهدف Silk'n Flash&Go Freedom™ ساق الشعرة، وخصوصًا الخلايا المصطبغة في بصيلة الشعرة وبصيلة الشعرة نفسها. ومع ذلك هناك خطر فرط التصبغ (زيادة التصبغ أو تبدل اللون إلى البني) أو نقص التصبغ (التبييض) المؤقتين في البشرة المحيطة. إن خطر حدوث تغييرات في لون البشرة هذا هو أعلى لدى الأشخاص الذين لديهم ألوان بشرة الداكنة. عادة ما يكون تبدل اللون أو التغييرات في صباغ البشرة مؤقتة ونادرًا ما يحدث فرط أو نقص تصبغ دائم.</p>
نادر	<p>احمرار وتورم مفرطان - في حالات نادرة قد تصبح البشرة المعالجة حمراء ومتورمة. يحدث هذا الأمر بشكل أكبر في المناطق الحساسة من الجسم. من شأن الاحمرار والتورم أن يتبددا خلال يومين إلى سبعة أيام وينبغي معالجتهما عن طريق وضع الجليد عليها عدة مرات. التنظيف اللطيف هو أمر جيد، ولكن ينبغي تجنب التعرض للشمس.</p>

٨. طريقة Silk'nFlash&Go™ لإزالة الشعر للمدى البعيد

تتفاوت فعالية إزالة الشعر بين شخص وآخر وفقاً لمنطقة الجسم، لون الشعر، وكيفية استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™. المخطط النموذجي لإزالة الشعر بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™ خلال دورة نمو الشعر الكاملة:

العلاجات ١ - ٤ - خططي فاصل أسبوعين بينها

العلاجات ٥ - ٧ - خططي فاصل أربعة أسابيع بينها

العلاجات ٨ - + - عالجي حسب الحاجة، حتى الحصول على النتيجة المطلوبة.

نتائج العلاج المتوقعة لإزالة الشعر

تغط البشرة حسب بقر بارتريك	لون الشعر	تدفق الضوء [J/cm ²]	المناطق التشريحية من الجسم ²	معدل عدد العلاجات ¹	تفاعلية (النسبة المئوية لإزالة/ نمو الشعر) ^١
I-IV	البنّي الفاتح حتى البنّي	٤,٥-٣	الجزء السفلي أو العلوي من الساقين	الجلسات ١٠ - ١٢، بفاصل أربعة أسابيع تقريباً.	بيل الشعر ٦٠٪
			الذراعان		بيل الشعر ٥٠٪
			خط البيكينّي		بيل الشعر ٦٠٪
			الإبط		بيل الشعر ٥٥٪
I-IV	البنّي حتى الأسود	٤,٥-٣	الجزء السفلي أو العلوي من الساقين	الجلسات ٨ - ١٠، بفاصل أربعة أسابيع تقريباً.	بيل الشعر ٧٠٪
			الذراعان		بيل الشعر ٦٠٪
			خط البيكينّي		بيل الشعر ٧٠٪
			الإبط		بيل الشعر ٦٥٪

١. تعتمد استجابة الفرد على نوع الشعر فضلاً عن العوامل البيولوجية التي قد تؤثر على أنماط نمو الشعر. قد يستجيب بعض المستخدمين بشكل أسرع أو أبطأ من معدل عدد العلاجات.

٢. لا يمكن للمرء أن يتوقع إزالة شعر دائم في جلسة علاج واحدة أو حتى جلسات علاج مضاعفة. تعتمد مدة فترة راحة بصيلات الشعر أيضاً على منطقة الجسم.

١. قومي بإخراج وحدة إزالة الشعر Silk'n Flash&Go Freedom™ والمكونات الأخرى من الصندوق.
٢. تحققى من أنه تم إدخال خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال بشكل صحيح في طرف الجهاز وأنها ليست تالفة.
٣. قومي بوصل سلك المحوّل في مقيس وحدة إزالة الشعر Silk'n Flash&Go Freedom™ .
٤. قومي بوصل المحوّل بمنفذ الكهرباء. يُضاء ضوء مؤشر الاستعداد.

جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™ جاهز الآن للبدء.

قومي باختيار منطقة للعلاج لم تعرض مؤخرًا للشمس.

٥. ينبغي أن تكون بشرة المنطقة المعالجة محلوقة، نظيفة، جافة وخالية من أي مساحيق، مضادات التعرق أو مزيلات الروائح. لا تقومي بإزالة الشعر عن طريق الشمع، النفت أو الملقط. الحلاقة هي خطوة هامة للحصول على النتائج التي تريدينها
٦. اضغطي على مفتاح التشغيل/ الاستعداد. يُضاء ضوء مؤشر الطاقة مشغلة (برتقالي) ويبدأ صوت مروحة (على غرار صوت مجفف الشعر).
٧. بعد حوالي ٥,٣ ثانية على الضغط على مفتاح التشغيل/ الاستعداد، يُضاء ضوء مؤشر الاستعداد (أخضر). حينها يكون الجهاز جاهزًا لتقومي بإطلاق النبضة الأولى على أدنى مستوى للطاقة
٨. إذا كان هذا هو علاجك الأول - قومي باختيار مستوى الطاقة. يقدم لك Silk'n Flash&Go Freedom™ ٥ مستويات طاقة من ١ (المستوى الأدنى) إلى ٥ (المستوى الأعلى). لاختيار مستوى الطاقة الصحيح لعلاجك الأول، قومي باختبار كل منطقة علاج على حدة

- ضعي سطح العلاج على البشرة واضغطي على الزناد لإطلاق نبضة واحدة. إذا كنت لا تعانين من أي إزعاج غير عادي اضغطي على زر + مرة وإطلاق نبضة واحدة على بقعة مختلفة بمستوى الطاقة 2.
- واصلى الاختبار على مستويات طاقة مختلفة حتى تصلي إلى أعلى مستوى تشعرين فيه بالراحة. إذا لم تشعرى خلال ساعة بأعراض ضائرة، يمكنك بدء علاجك الكامل في مستوى الطاقة ذلك.
- قومي بتكرار هذا الفحص لكل جزء من جسمك تريدين علاجه.

٩. قومي بضبط مستوى الطاقة. إذا كان من المفروض أن يكون مستوى الطاقة أعلى من المستوى الأدنى، اضغطي على أزرار ضبط مستوى الطاقة بواسطة استخدام "-" أو "+" لخفض أو زيادة مستوى الطاقة على التوالي، حتى يتم ضبط مستوى الطاقة المطلوب وتمثيله بواسطة ٣ أضواء مؤشر مستوى الطاقة (لمزيد من المعلومات انظري فصل "مستوى الطاقة" في دليل المستخدم (هذا

١٠. قومي بوضع سطح العلاج على البشرة، متأكدة من أن البشرة ممتدة بنسق واحد وبسلاسة. بمجرد أن يكون سطح العلاج على اتصال كامل مع البشرة، يبدأ ضوء مؤشر الاستعداد بالوميض
١١. اصغطي على زر النبض. سيحدد الجهاز أولاً لون بشرتك. إذا كان لون البشرة فاتحاً بما يكفي للتطبيق الآمن، سيطلق الجهاز نبضة ضوء على بشرتك، وسيطفأ ضوء مؤشر الاستعداد.
- سترين ميضاً من الضوء الساطع وستسمعين في نفس الوقت صوت فرقة خفيفة، وهو صوت طبيعي للجهاز. ستشعرين بإحساس خفيف من الدفء أو الوخز.
- سيقوم Silk'n Flash&Go Freedom™ في الحال بإعادة الشحن للنبضة التالية.
- بعد ٣,٥ ثوان سيضاء مرة أخرى ضوء مؤشر الاستعداد.
١٢. قومي بإبعاد سطح العلاج عن منطقة البشرة المعالجة.
١٣. حرّكي سطح العلاج إلى منطقة أخرى من البشرة. استعيني بالعلامات التي خلفها الجهاز للتو على بشرتك لإرشادك بالنسبة لتحديد المواقع المناسبة للنبضة التالية، في الوقت الذي تتجنبين فيه كل من الفجوات والتداخلات بين النبضات.

ينبغي إعطاء نبضات Silk'n Flash&Go Freedom™ في صفوف، بدءاً من نهاية أحد طرفي الصف والتقدم بشكل متعاقب نحو الطرف الآخر. تتيح هذه التقنية سيطرة أفضل على تغطية البشرة، وتساعدك على تجنب معالجة نفس المنطقة أكثر من مرة أو تداخل مناطق البشرة.

عند التطبيق على البشرة، فإن سطح علاج Silk'n Flash&Go Freedom™ مصمم ليترك علامات ضغط مؤقتة على المنطقة المعالجة. يمكن استخدام هذه العلامات المرئية لوضع النبضة التالية في المكان المناسب.

حاولي تجنب تداخل النبضات!



تحذير: لا تعالجي نفس المنطقة من البشرة أكثر من مرة واحدة في كل جلسة لإزالة الشعر!
من شأن علاج نفس المنطقة من البشرة أكثر من مرة واحدة في كل جلسة أن يزيد من احتمال التأثيرات الضارة



١٤. قومي بتكرار العملية حتى تتم تغطية منطقة العلاج بأكملها.

إذا أصيب جلدك بنفطات أو حروق، توقفي عن الاستخدام في الحال!



مستوى الطاقة

يحدد مستوى الطاقة شدة نبضة ضوء Silk'n Flash&Go Freedom™ التي تُطلق على بشرتك، من المستوى الأدنى (-) إلى المستوى الأعلى (+). مع زيادة مستوى الطاقة، تزيد أيضًا نتائج إزالة الشعر وكذلك خطر الأعراض الجانبية والمضاعفات المحتملة.

يعرض Silk'n Flash&Go Freedom™ مستويات من الطاقة، من ١ (الأدنى) إلى ٥ (الأعلى)، وتُمثّل بواسطة ٣ أضواء مؤشر مستوى الطاقة:

المستوى ١ (الأدنى) - ضوء المؤشر الأبيض مضاء بشكل ثابت

المستوى ٢ - ضوء المؤشر الأبيض مضاء بشكل دائم وضوء المؤشر المركزي يومض.

المستوى ٣ - ضوء المؤشر الأبيض والمركزي مضاءان بشكل دائم

المستوى ٤ - ضوء المؤشر الأبيض والمركزي مضاءان بشكل دائم وضوء المؤشر الأيمن يومض.

المستوى ٥ (الأعلى) - أضواء المؤشر الـ ٣ مضاءة بشكل دائم.

في كل مرة يتم فيها تشغيل Silk'n Flash&Go Freedom™، يتم إعادة ضبط مستوى طاقته تلقائيًا إلى أدنى مستوى طاقة. سيكون ضوء مؤشر مستوى طاقة واحد فقط مشغلاً.

لضبط مستوى الطاقة، اضغط على أزرار ضبط مستوى الطاقة بواسطة استخدام "-" أو "+" لخفض أو زيادة مستوى الطاقة على التوالي.

مستشعر لون البشرة

من الممكن أن تؤدي إزالة الشعر المستندة إلى الضوء في البشرة الداكنة إلى تأثيرات ضائرة مثل الحروق، النفطات، وتغييرات في لون البشرة (قرط أو نقص التصبغ).

للحيلولة دون إساءة استعمال كهذه، يقوم مستشعر فريد للون البشرة في Silk'n Flash&Go Freedom™ بقياس لون البشرة المعالجة في بداية كل جلسة وخلال الجلسة أحياناً. إذا كان مستشعر لون البشرة يكتشف درجة لون بشرة داكنة جداً لتطبيق Silk'n™

Flash&Go Freedom ، سيقوم الجهاز تلقائيًا بوقف إطلاق النبضات.

إذا كنت لا تترين أي نبضة ضوء وضوء مؤشر تحذير درجة لون البشرة يومض، فإن ذلك إشارة إلى أن درجة لون بشرتك، التي

تم قياسها من قبل مستشعر لون البشرة، داكنة جداً لتتيح التطبيق الآمن. حاولي استخدام الجهاز على جزء آخر من الجسم أو قومي

بالاتصال بخدمة دعم Silk'n Flash&Go Freedom™.

تغطية مناطق البشرة

ينبغي إعطاء نبضات Silk'n Flash&Go Freedom™ في صفوف، بدءًا من نهاية أحد طرفي الصف والتقدم بشكل متعاقب نحو الطرف الآخر. تتيح هذه التقنية سيطرة أفضل على تغطية البشرة، وتساعد على تجنب معالجة نفس المنطقة أكثر من مرة أو تداخل مناطق البشرة.

عند التطبيق على البشرة، فإن سطح علاج Silk'n Flash&Go Freedom™ مصمم ليترك علامات ضغط مؤقتة على المنطقة المعالجة. يمكن استخدام هذه العلامات المرئية لوضع النبضة التالية في المكان المناسب.



حاولي تجنب تداخل النبضات!
لا تعالجي نفس المنطقة من البشرة أكثر من مرة واحدة في كل جلسة لإزالة الشعر!



إذا أصيب جلدك بنفطات أو حروق، توقفي عن الاستخدام في الحال!

٩.١. ما الذي يمكن توقعه عند العلاج بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™؟

قد يكون استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ بالنسبة للكثير من الناس بمثابة تجربتهم الأولى مع جهاز يستند إلى الضوء ومصمم للاستخدام المنزلي. إن Silk'n Flash&Go Freedom™ هو سهل الاستعمال، وتجري جلسات إزالة الشعر بسرعة. إنه أمر طبيعي أن تواجهي وأن تشعر ي خلال جلسة Silk'n Flash&Go Freedom™ بما يلي:

- ضجيج مروحة - تصدر مروحة التبريد في Silk'n Flash&Go Freedom™ ضجيجًا يشبه ضجيج مجفف الشعر. هذا أمر طبيعي.
- صوت فرقة مع كل نبضة - عندما يتم تفعيل نبضة من HPL™، فمن الطبيعي أن تسمعي صوت فرقة طفيفة بالتزامن مع وميض من الضوء.
- ضغط معتدل من سطح العلاج- هذا أمر ضروري ومفيد لوضع نبضات ضوء متاخمة، ويشكل جزءًا من ميزة الأمان الفريدة لـ Silk'n Flash&Go Freedom™.
- إحساس بالدفع وبالوخز- من الطبيعي الشعور خلال كل نبضة ضوء بإحساس خفيفة من الدفع والوخز من الطاقة الضوئية.
- بعض اللون الأحمر الخفيف أو الوردى - ليس من غير المألوف أن تري أثناء Silk'n Flash&Go Freedom™ وبعدها بقليل بعض اللون الوردى الخفيف على البشرة. عادة ما يكون ذلك بارزًا حول الشعر.
- ولكن إذا كنت ترين احمرار كامل الجلد، وظهور نطفات أو حروق توقفي عن استخدام Silk'n Flash&Go Freedom™ في الحال.

٩.٢. بعد العلاج بواسطة Silk'n Flash&Go Freedom™

- عندما يتم الانتهاء من جلسة Silk'n Flash&Go Freedom™ قومي بإطفاء قومي بإطفاء Silk'n Flash&Go Freedom™ عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل/الإستعداد. ستُطفأ كل المؤشرات المضاءة وسيضاء ضوء مؤشر الإستعداد (تأكد من أن تتذكر مستوى الطاقة الأخير الذي استخدمته، حيث أنه لن تتم استعادته عند تشغيل Silk'n Flash&Go Freedom™ مرة أخرى).
- قومي بفصل المحوّل عن المخرج الكهربائي.
- بعد كل جلسة إزالة شعر يوصى بأن تقومي بتنظيف جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™ ، خاصة سطح العلاج (انظري: "تنظيف Silk'n Flash&Go Freedom™").
- بعد التنظيف، يوصى بتخزين جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™ في صندوقه الأصلي، والاحتفاظ به بعيدًا عن الماء.

العناية بالبشرة في أعقاب جلسة إزالة الشعر

لا تعرضي المناطق المعالجة من البشرة للشمس. تأكدي من حماية البشرة المعالجة بعناية بواسطة واقي الشمس، طوال فترة إزالة الشعر ولمدة أسبوعين على الأقل بعد جلسة Silk'n Flash&Go Freedom™ الأخيرة.



١٠. صيانة™ Silk'n Flash&Go Freedom

١٠.١. تنظيف™ Silk'n Flash&Go Freedom

بعد كل جلسة إزالة شعر، يوصى بتنظيف جهاز™ Silk'n Flash&Go Freedom ، خاصة سطح العلاج.

■ قومي بفصل™ Silk'n Flash&Go Freedom عن الكهرباء قبل التنظيف.

■ استخدمي قطعة قماش جافة ونظيفة وأداة تنظيف معدة خصيصًا للمعدات الإلكترونية لمسح سطح™ Silk'n Flash&Go Freedom بلطف، وخاصة سطح العلاج.

■ لا تعمري أبدًا™ Silk'n Flash&Go Freedom أو أي من أجزائه في الماء!

١٠.٢. استبدال خرطوشة المصباح

تستطيع خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال الخاصة ب™ Silk'n Flash&Go Freedom إطلاق عدد محدد مسبقًا من نبضات الضوء. لا تتحدد شدة النبضة إلا بموجب ضبط مستوى طاقة الجهاز. ليس هنالك هبوط في الطاقة خلال مدة حياة استخدام خرطوشة المصباح. لا تعمري أبدًا™ Silk'n Flash&Go Freedom أو أي من أجزائه في الماء!

عندما لا يبقى إلا ١٠٠ نبضة ضوء في الخرطوشة الوحيدة الاستعمال، سيبدأ ضوء مؤشر استبدال الخرطوشة الموجود على لوحة التحكم بالوميض، مشيرًا إلى أنه يتعين استبدال الخرطوشة الوحيدة الاستعمال عما قريب.

مع مواصلة هبوط عدد نبضات الضوء الموجودة في الخرطوشة الوحيدة الاستعمال، سيومض ضوء مؤشر الخرطوشة الوحيدة الاستعمال بشكل أسرع.

ما أن يتم استعمال جميع النبضات في الخرطوشة الوحيدة الاستعمال، سيبقى ضوء مؤشر الخرطوشة الوحيدة الاستعمال مضاء بشكل دائم، مشيرًا إلى أنه يتخذ إطلاق المزيد من النبضات.

من أجل مواصلة جلسة إزالة الشعر، سيكون من الضروري الآن استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال.

ملاحظة: ينبغي أيضًا استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال إذا كانت تظهر فيها بقع كبيرة أو إذا ما كان سطح العلاج مكسورًا.



لاستبدال خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال:

١. اضغطي على مفتاح التشغيل/ الاستعداد لتحويل™ Silk'n Flash&Go Freedom إلى وضع الاستعداد.

٢. قومي بفصل المحوّل عن المخرج الكهربائي.

٣. اقتبسي على خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال من كلا الجانبين، واسحبها من المقبس وتخلصي منها مع النفايات العادية.

٤. أزيلي غلاف خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال الجديدة.

٥. اضغطي خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال الجديدة بلطف إلى مكانها.

ملاحظة! بعد استبدال خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال بخرطوشة جديدة، قومي دائمًا بضبط الطاقة بمستوى واحدة أقل من مستوى العادي لك. لا تقومي بإعادة مستوى الطاقة إلا إذا كنت لا تواجهين إزعاجًا غير عادي خلال العلاج أو بعده.

١١. اكتشاف المشاكل وحلها

١١,١. "جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™ لا يبدأ التشغيل"

- تأكدي من أن محول الطاقة موصل بشكل صحيح في جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™ .
- تأكدي من أن محول الطاقة موصل بمخرج الكهرباء على الحائط.

١١,٢. "لا يتم إطلاق نبضة ضوء عندما أضغط على زر النبض"

- تأكدي من أن ضوء مؤشر الاستعداد يومض لضمان أن يكون لديك اتصال جيد مع البشرة وأنه يتم ضغط سطح العلاج بشكل متساو وبثبات على البشرة. حافظا على سلامتك، فإنه لن يتم تشغيل زر النبض إلا إذا كان سطح العلاج يضغط بثبات على البشرة.
- افحصي ضوء مؤشر تحذير درجة لون البشرة. إذا كان يومض، تكون هذه إشارة على أن درجة لون بشرتك، التي تقاس عن طريق مستشعر لون البشرة، داكنة جدًا للتطبيق الآمن. حاولي استخدام الجهاز على جزء آخر من الجسم أو قومي بالاتصال بخدمة دعم Silk'n Flash&Go Freedom™.
- افحصي ضوء مؤشر استبدال الخرطوشة. إذا كان مضاء، قومي بفصل Silk'n Flash&Go Freedom™ واستبدلي خرطوشة المصباح الوحيدة الاستعمال.
- تأكدي من أن مؤشر الاستعداد مضاء.
- إذا بقي في غضون ١٠ ثوان مؤشر الاستعداد مطفأ، قومي بإطفاء Silk'n Flash&Go Freedom™ وتشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط.
- على مفتاح التشغيل/ الاستعداد مرتين.
- افحصي ضوء مؤشر تحذير النظام.
- إذا كان الضوء مضاء قومي بإطفاء Silk'n Flash&Go Freedom™ وبتشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط على مفتاح التشغيل/ الاستعداد مرتين.
- في حال استمرت المشكلة، قومي بالاتصال بمركز خدمة عملاء Silk'n المحلي.
- في حال استمرت هذه المشاكل، قومي بالاتصال بمركز خدمة عملاء Silk'n المحلي.

لا تحاولي فتح أو تصليح جهاز Silk'n Flash&Go Freedom™. لا يُسمح إلا لمراكز معتمدة لتصليح Silk'n™ بإجراء التصليحات.



من الممكن أن يعرضك فتح Silk'n Flash&Go Freedom™ لمكونات كهربائية خطيرة ولطاقة ضوء نابض، يمكن سبب كليهما ضررًا جسديًا بالغا و/ أو إصابات دائمة في العينين.
من الممكن أيضًا أن تلحق محاولة فتح Silk'n Flash&Go Freedom™ الضرر بالجهاز وأن تؤدي إلى إبطال الكفالة.
يرجى الاتصال بخدمة عملاء Silk'n™ إذا كان لديك جهاز مكسورًا أو تالفاً يحتاج إلى إصلاح.

١٢. خدمة العملاء

لمزيد من المعلومات حول منتجات Silk'n™ يرجى الدخول إلى موقع Silk'n™ المحلي، www.silkn.com أو www.silkn.eu.
إذا كان جهازك مكسورًا، تالفًا، بحاجة إلى إصلاح، أو لأي مساعدة أخرى للمستخدم، يرجى الاتصال بخدمة عملاء Silk'n™ المحلية:
لعملاء الولايات المتحدة وكندا: contact@silkn.co.il / 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556,
للعملاء في الدول الأخرى: contact@silkn.co.il.

١٣. المواصفات

1.3 سم × 3 سم [3.9 سم ²]	حجم البقعة	
نبضة واحدة كل 3.5 ثانية / 1.1 سم ² ثانية	السرعة	
Home Pulsed Light™	التقنية	
الحد الأقصى لـ 5 سم ²	مستوى الطاقة الأقصى	
1200-475 نم	طول الموجة	
التشغيل المتواصل	زمن الشحن/ مصدر الطاقة	
100-240VAC, 0.9A	المتطلبات الكهربائية	
30 دقيقة	الوقت اللازم لعلاج الساقين السفليين	
مستشعر لون البشرة جديد يضمن الاستخدام فقط على البشرات المناسبة.	التشغيل والأمان	
22 سم × 22 سم × 14 سم	حجم الرزمة	
0.35 كغم	وزن الجهاز	
10 إلى 40 درجة مئوية	التشغيل	درجة الحرارة
- 40 إلى +70 درجة مئوية	التخزين	
to 75%rH 30	التشغيل	الرطوبة النسبية
to 90%rH 10	التخزين	
to 1060hPa 700	التشغيل	الضغط الجوي
to 1060hPa 500	التخزين	

The logo features a stylized, dark grey wave-like graphic above the text.

HomeSkinovations™
contact@silkn.co.il
www.silkn.co.il