


**Silk'n**™  
Beautiful Technology

**Infinity**


H3101

**RU** РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



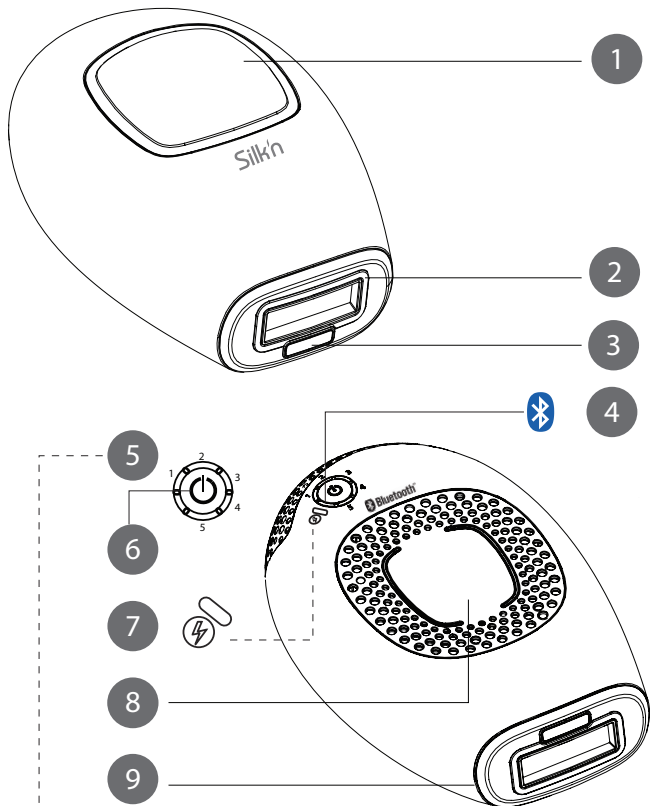

צבע עור / لون البشرة / Skin color

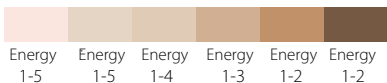

## Оглавление

1. Предупреждения и противопоказания .....	2
2. Безопасность при обращении с устройством Silk'n Infinity .....	11
3. Познакомьтесь с устройством Silk'n Infinity .....	12
4. Управление и настройки.....	13
5. Познакомьтесь с устройством Silk'n Infinity .....	17
6. Возможные побочные эффекты .....	17
7. План лечения .....	19
8. Начало работы.....	20
9. Очистка и обслуживание .....	23
10. Подключение Silk'n Infinity к Bluetooth .....	23
11. Выявление и устранение неполадок .....	24
12. Отдел обслуживания клиентов .....	25
13. Гарантия.....	25
14. Утилизация.....	26
15. Технические характеристики.....	26
16. Обозначения и символы.....	28
17. Правовые положения.....	29

## 1. Предупреждения и противопоказания

---

Это Руководство пользователя основано на стандартах и нормативах, действующих в Европейском Союзе. Находясь за границей, вы должны также соблюдать нормативы и законы, принятые в данной стране. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми предупреждениями и противопоказаниями.

- ⚠ Прежде чем подключать адаптер к розетке, убедитесь, что у вас сухие руки.
- ⚠ Не пользуйтесь устройством под душем и во время принятия ванны.
- ⚠ Храните устройство подальше от воды! Не оставляйте и не храните устройство там, где оно может упасть или съехать в ванную, раковину или иную емкость с водой.
- ⚠ Ни в коем случае не погружайте устройство или его детали в воду.
- ⚠ Если на устройство попала вода, не прикасайтесь к нему и немедленно отключите его от электросети.

- ⚠️ Никогда не используйте адаптер, если у него поврежден кабель питания или вилка, если он не работает должным образом или был опущен в воду. В таком случае не прикасайтесь к адаптеру не отключив его, предварительно, от электричества. Если адаптер не отключить от сети, существует риск поражения электрическим током!
- ⚠️ Не эксплуатируйте устройство в помещениях, где существует опасность взрыва. Храните устройство и все его части вдали от открытого огня и горячих поверхностей.
- ⚠️ Никогда не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к электросети. Адаптер должен всегда находиться в пределах досягаемости, чтобы его можно было легко отключить от электричества в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
- ⚠️ Всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от источника электропитания, когда вы не используете его, собираетесь его очистить или в случае неисправности.

- ⚠️ Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить адаптер от электрической розетки. Для этого беритесь рукой только за сам адаптер.
- ⚠️ Располагайте кабель адаптера таким образом, чтобы о него нельзя было споткнуться.
- ⚠️ Не перегибайте кабель адаптера и не кладите его на предметы с острыми краями.
- ⚠️ Держите устройство вдали от глаз. Устройство испускает оптическое излучение, опасное для глаз. Не смотрите на работающую лампу. Это может привести к повреждению глаз.
- ⚠️ Изменения или модификации этого устройства, не одобренные в явно выраженной форме стороной, ответственной за соответствие нормативным требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.
- ⚠️ Не используйте части и принадлежности других производителей, как указано в руководстве пользователя; не пользуйтесь устройством, если оно повреждено, неправильно функционирует неправильно, а также при появлении дыма или запаха дыма. В таких случаях прекратите

использование устройства и обратитесь в отдел обслуживания клиентов.

- ⚠ Чинить устройство разрешается только квалифицированному персоналу. Не пытайтесь модифицировать, вскрывать или самостоятельно чинить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.
- ⚠ Производитель не несет ответственности за ущерб или травмы, вызванные несоответствующим или неправильным использованием устройства.
- ⚠ Не позволяйте детям играть с устройством или его компонентами.
- ⚠ Не позволяйте детям играть с упаковкой устройства. Игра с упаковкой могут привести к травмам, а проглатывание мелких деталей — к удушью.
- ⚠ Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов в соответствующих пунктах сбора.

Подробная информация приведена в разделе “14. Утилизация”.

## **Противопоказания**

- ⚠ Устройство Silk'n Infinity не должно использоваться следующими категориями людей: детьми, взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или психологическими возможностями или людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний о том, как пользоваться данным устройством.
- ⚠ Устройство Silk'n Infinity подходит не всем. Удаление волос с помощью лазера или интенсивных импульсных источников света может вызвать увеличение роста волос у некоторых людей. На основании имеющихся в настоящее время данных, к группе наивысшей степени риска, у которой может наблюдаться такая реакция, входят женщины из регионов Средиземноморья, Ближнего Востока и Южной Азии при использовании устройства на лице и шее.
- ⚠ Silk'n Infinity непригодно к использованию у детей или животных.



## **Не используйте, если:**

- ⚠ вы беременны или кормите грудью;
- ⚠ в прошлом у вас была предрасположенность к образованию келоидных рубцов;
- ⚠ вы страдали или страдаете эпилепсией;
- ⚠ вы страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, например порфирией, полиморфным фотодерматозом, солнечной крапивницей, волчанкой и др;
- ⚠ в прошлом у вас был рак кожи или наблюдались участки кожи с потенциальными злокачественными образованиями;
- ⚠ в течение последних 3-х месяцев вы проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии;
- ⚠ применяли в течение последних 6 месяцев рецептурные препараты в связи с заболеваниями кожи;
- ⚠ имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению лечащего врача, будет небезопасно;

⚠ вы не в состоянии ощущать тепло по причине заболевания или иного состояния.

### **Не применяйте прибор на следующих частях тела:**

⚠ на загорелой коже; См. раздел “4.5. Воздействие солнца”;

⚠ для обработки кожи вокруг или возле глаз; не используйте выше уровня скул;

⚠ на коже с татуировками, перманентным макияжем, темнокоричневыми или черными пятнами (например, большие веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки), на сосках, гениталиях или губах;

⚠ На участках, которые были инъецированы или подвергнуты действию токсических веществ;

⚠ не обрабатывайте участки кожи, на которых в прошлом возникал герпес;

- ⚠ на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах или инфицированных зонах (герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет);
- ⚠ на участках, на которых вы, возможно, захотите отрастить волосы. Результаты обработки являются перманентными.

### **Дополнительные предупреждения**

- ⚠ Перед использованием снимите всю бижутерию.
- ⚠ Никогда не используйте для протирания лица перед обработкой горючие жидкости, такие как спирт (в том числе духи, дезинфицирующие лосьоны и прочие жидкости, в состав которых входит спирт) или ацетон.
- ⚠ Тщательно выбирайте настройки уровня энергии. Повышение уровня энергии улучшает эффективность эпиляции, однако при этом повышается и риск возможных побочных явлений и осложнений.

- ⚠ При выборе уровня энергии следуйте рекомендациям в таблице, где перечислены цвет волос и оттенки кожи; это позволит избежать ожогов, волдыри и изменения цвета кожи (см. таблицу в начале данного руководства).
- ⚠ Прежде чем приступить к обработке той или иной части тела, обязательно выполните тест на небольшом участке кожи.
- ⚠ Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции.
- ⚠ При обработке кожи избегайте перекрывания или пропусков зон обработки.
- ⚠ Если вы испытываете легкий дискомфорт, используйте минимальный уровень энергии.
- ⚠ Не подвергайте обработанные зоны воздействию солнечных лучей и не используйте уровни энергии 2-5 на загорелой коже или после недавнего пребывания на солнце (распространяется также и на устройства для искусственного загара). См. раздел "4.5. Воздействие солнца".

- ⚠ Если замечаете полное покраснение кожи, появление на ней волдырей или ожогов, немедленно прекратите использование прибора.
  - ⚠ Если процедура причиняет вам боль, немедленно прекратите процедуру.
  - ⚠ Немедленно прекратите процедуру, если кожа становится слишком горячей.
2. Безопасность при обращении с устройством  
Silk'n Infinity
- 

Silk'n Infinity – безопасность прежде всего. Технология **Enhanced Home Pulsed Light™ (eHPL)** обеспечивает повышенный уровень безопасности при меньших уровнях энерго-излучения.

Технология eHPL™ (ИИС) позволяет добиться эффективного долгосрочного удаления волос. При этом используется существенно более низкий уровень энергии, по сравнению с другими типами светоизлучающих устройств, предназначенных для удаления волос. Технология использует сочетание 2 источников энергии: гальванической и световой (оптической). Гальваническая энергия способствует лучшему проникновению оптической энергии в стержень волоса за счет временного расширения пор кожи. Стержень волоса поглощает свет, при этом происходит деактивация волосяного фолликула и рост волоса прекращается.

Низкий уровень энергии снижает риск травм или возникновения осложнений, а также способствует безопасности пользователя.

### **Silk'n Infinity защищает вашу кожу**

Удаление волос под воздействие световой энергии непригодно для загорелой кожи. Silk'n Infinity включает **датчик цвета кожи**, предназначенный для определения качества обрабатываемой поверхности кожи, что позволяет выбрать уровень энергии, соответствующий для конкретного типа кожи.

**Обрабатываемая поверхность**, через которую подаются световые импульсы, находится в углублении. Это Silk'n Infinity защищает вашу кожу, предотвращая прямой контакт **обрабатываемой поверхности** с кожей.

## Silk'n Infinity защищает ваши глаза

Silk'n Infinity снабжено встроенной функцией защиты глаз. Устройство сконструировано таким образом, что световое излучение отключается, если **обрабатываемая поверхность** обращена в воздух. Эта защитная функция обеспечивает воздействие на кожу только в том случае, когда **обрабатываемая поверхность** находится в контакте с кожей.

## 3. Познакомьтесь с устройством Silk'n Infinity

---

Silk'n Infinity – это мощное электрическое устройство, которое следует использовать, уделяя особое внимание безопасности. **Перед использованием важно прочесть и понять инструкции по использованию устройства, в том числе процедуры после завершения использования, и неукоснительно следовать им.** Перед каждой процедурой мы рекомендуем просматривать инструкции, приведенные в настоящем руководстве.

### 3.1. Содержимое упаковки

Содержимое упаковки зависит от типа приобретаемого комплекта.

#### Принадлежности устройства Infinity

- Устройство Silk'n Infinity
- Адаптер
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Футляр

**Silk'n Infinity с лосьоном для кожи:** в состав входят все перечисленные принадлежности плюс лосьон для кожи.

**Silk'n Infinity с емкостью для очистки:** в состав входят все перечисленные принадлежности Infinity емкость для очистки устройства.

### 3.2. Описание устройства

Silk'n Infinity — это предназначенное для использования в домашних условиях устройство, в котором для удаления нежелательных волос используется технология eHPL™. Основными элементами прибора являются **обрабатываемая поверхность** и **генератор импульсов**. Прибор также включает пару электродов — **основной** и **контактный**, что позволяет создавать и использовать гальваническое воздействие. Чтобы увидеть расположение каждого элемента устройства, обратитесь к схеме, расположенной в начале данного руководства.

1. Генератор импульсов
2. Рабочая поверхность
3. Датчик цвета кожи
4. Световой индикатор Bluetooth
5. Световая индикация запаса энергии
6. Кнопка управления
7. Световой сигнал готовности / предупреждения о цвете кожи
8. Основной электрод
9. Контактный электрод

### 3.3. Назначение

Silk'n Infinity предназначен для удаления нежелательных волос. Устройство также предназначено для долгосрочного эффекта или постоянного уменьшения волосяного покрова. Постоянное уменьшение волосяного покрова определяется как постоянное, долгосрочное сокращение количества волос, отросших после предыдущей обработки. Устройство используется для удаления нежелательного волосяного покрова на теле. Идеально подходящие участки тела включают: подмышки, линию бикини, руки, ноги, лицо (ниже скул), спину, плечи и грудь.

Silk'n Infinity не является медицинским устройством. Предназначается для использования исключительно в косметических целях. Устройство предназначено для персонального пользования и непригодно для коммерческого или терапевтического применения.

Не используйте устройство для каких-либо целей, помимо описанных в данном руководстве.

## 4. Управление и настройки

### 4.1. Управление устройством

Чтобы увидеть расположение каждого элемента устройства, обратитесь к схеме, расположенной в начале данного руководства.

Кнопка управления	Действие	Функция / режим
Кнопка включения (6)	Короткое нажатие	Каждое нажатие повышает уровень энергии. Начальный уровень, устанавливаемый по умолчанию, — это 1. При изменении уровня энергии можно пройти все доступные уровни и снова возвратиться на уровень 1.

Кнопка управления	Действие	Функция / режим
Генератор импульсов (1)	Короткое нажатие	Запускает последовательность световых импульсов.
Контактный электрод (9)	Короткое нажатие	Запускает последовательность световых импульсов при одновременном нажатии в <b>генератором импульсов</b> .
Световой индикатор уровня энергии (зеленый) (5)	Постоянный	Число светящихся индикаторов указывает уровень энергии.
Световой сигнал готовности / предупреждения о цвете кожи (зеленый) (7)	Постоянный	Устройство готово к работе.
	Быстро мигает	Цвет вашей кожи слишком темный для безопасного использования. Световые импульсы не генерируются.
Индикатор Bluetooth (синий) (4)	Мигает	Bluetooth активен.

## 4.2. Датчик цвета кожи

Использование фотоэпилятора на темной коже может привести к таким нежелательным реакциям, как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация). Эпилятор Silk'n Infinity оснащен **датчиком цвета кожи**, который автоматически определяет цвет кожи пользователя. Сенсор цвета кожи проверяет цвет кожи в начале процедуры и периодически в ходе ее выполнения.

**i** Если вы не видите световых импульсов, а **световой сигнал готовности / предупреждения о цвете кожи** быстро мигает, то это говорит о том, что тон вашей кожи, измеренный **датчиком цвета кожи**, является слишком темным для безопасного использования устройства. Попробуйте применить устройство на другом участке тела.




### 4.3. Уровни энергии

Уровень энергии определяет интенсивность светового импульса, передаваемого на кожу. По мере увеличения уровня энергии, повышается как эффективность эпиляции, так и риск возможных побочных явлений и осложнений.

- Устройство имеет 5 уровней энергии – от 1 (самый низкий) до 5 (самый высокий), которые отображаются с помощью 5-и **световых индикаторов**.
- Когда устройство выключается, уровень энергии автоматически устанавливается на уровне 1. Будет светиться только один **световой индикатор уровня** энергии.
- Чтобы изменить уровень энергии, несколько раз нажмите **кнопку управления** для увеличения уровня энергии от 1 до 5. Достигнув уровня 5, нажмите **кнопку управления** снова, чтобы уменьшить уровень энергии с 5 до 1.

### 4.4. Пульсация и скольжение

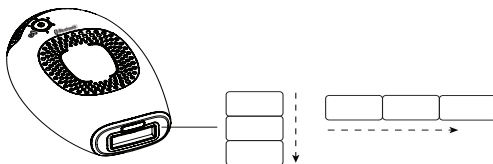

Наилучший способ для точечной обработки или обработки небольших участков кожи – **пульсация**.

- Плотно прижмите **рабочую поверхность** к коже. Работа по рядам (поперек или вдоль, как показано на изображении). Начните с одного конца каждого ряда и продолжайте к другому концу.
- **Рабочая поверхность** устройства оставляет временные следы на обрабатываемом участке, так что можно видеть части тела, которые уже были обработаны.
- После каждого импульса, перемещайте **рабочую поверхность** к следующему участку. Продолжайте оказывать пульсирующее воздействие на участок тела, который обрабатываете.

- Старайтесь не пропускать участки обрабатываемой кожи и не обрабатывайте участки повторно.

Наилучший способ обработки обширных участков кожи – **скольжение**.

Крепко прижмите **рабочую поверхность** к своей коже и медленно скользите ей по коже (вверх и вниз, как показано на изображении). Убедитесь, что кожа всегда соприкасается с **рабочей поверхностью** устройства.

- При низких уровнях энергии, перезарядка устройства занимает всего 1-1,5 секунды между импульсами. Это вызывает непрерывную последовательность импульсов.
- Осуществляйте процесс скольжения на такой скорости, которая позволяет избежать пропусков и наложений.
- Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции.



Если процедура причиняет вам боль, немедленно прекратите процедуру.

#### 4.5. Воздействие солнца

- Самый низкий уровень энергии (1) предназначен для безопасного использования даже после пребывания на солнце.
- Если используете уровни энергии 2-5, избегайте воздействия солнечных лучей в течение **4-х недель до и 2-х недель после** процедуры. Это обусловлено тем, что при использовании любого светового метода удаления волос, наличие большого количества меланина подвергает кожу более высокому риску. Это касается всех типов кожи, включая те, которые быстро не загорают.
- Хотя это и не рекомендуется, но если после процедуры вам необходимо выйти на солнце, нанесите на обработанную поверхность кожи солнцезащитный крем с фактором SPF 30 или выше. Это следует делать на протяжении **2 недель** после обработки кожи.

#### 4.6. Воздействие пульсирующего света на глаза

- Хотя устройство можно использовать для удаления волос на лице, можно обрабатывать только области ниже скул, проявляя при этом особую осторожность во избежание контакта с глазами.



Устройство излучает пульсирующую энергию только при плотном контакте с кожей и перемещении по поверхности кожи.

## 5. Познакомьтесь с устройством Silk'n Infinity

Во время сеанса обработки устройством Silk'n Infinity могут возникнуть такие ощущения как:

- **Шум вентилятора:** Охлаждающий вентилятор издает звук, напоминающий шум фена.
- **Хлопающий звук, сопровождающий каждый импульс:** при активации световых импульсов eNPL™ в норме слышатся слабые хлопки или щелчки, сопровождающие каждую вспышку света.
- **Ощущение тепла и пощипывания:** при обработке кожи последовательностью гальванических и световым импульсов в норме ощущается слабое тепло и легкое покалывание, обусловленные воздействием гальванической и световой энергии.
- **Кожа приобретает красноватый или розовый оттенок:** во время обработки кожа может приобретать розоватый оттенок. Обычно это заметно непосредственно вокруг самих волосков.



Если замечаете полное покраснение кожи, появление на ней волдырей или ожогов, немедленно прекратите использование прибора.

## 6. Возможные побочные эффекты

При использовании устройства в соответствии с инструкциями побочные эффекты и осложнения наблюдаются Silk'n Infinity нечасто. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о рисках и осложнениях, которые случаются во время фотоэпиляции в домашних условиях.

### **Небольшое раздражение кожи**

Обычно процедура удаления волос с помощью световых импульсов в домашних условиях переносится очень хорошо. Однако некоторые пользователи ощущают небольшой дискомфорт во время ее проведения. Это ощущение можно описать как незначительное покалывание кожи в области применения. Ощущение покалывания может длиться во время или в течение некоторого времени после сеанса.

Это означает, что устройство следует использовать на более низком уровне энергии, а если это не помогает, использование устройства следует прекратить.

### **Покраснение кожи**

Покраснение кожи может наблюдаться сразу после применения устройства или в течение 24 часов после процедуры. Обычно покраснение проходит в течение 24 часов.

**Если краснота не проходит в течение 2-3 дней, обратитесь к врачу.**

Убедитесь, что используете удобный уровень энергии, который подходит для цвета вашей кожи.

### **Повышенная чувствительность кожи**

Кожа на обработанном участке более чувствительна, поэтому вы можете столкнуться с сухостью или шелушением кожи.

### **Изменения пигмента**

Устройство воздействует на стержень волоса, в частности, на пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации (увеличение количества пигмента или коричневая депигментация) или гипопигментации (отбеливания) окружающих участков кожи. Риск изменений в пигментации кожи выше у людей, которые имеют кожу более темных оттенков. Обычно депигментация или изменения пигмента кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или гипопигментация случаются в очень редких случаях.

### **Чрезмерное покраснение и припухлость**

В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть и припухнуть. Как правило, это случается на чувствительных участках тела. Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней и на этот участок кожи необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая санитарная обработка, но необходимо избегать солнечного воздействия.

### **Волдыри или ожоги**

Охладите пораженный участок и нанесите на него крем против ожогов. Прежде, чем приступить к следующей процедуре, дождитесь, пока пораженный участок кожи полностью не заживет и используйте более низкий уровень энергии. **Если кожа не возвращается к нормальному состоянию в течение трех дней, обратитесь к своему врачу.**



Немедленно прекратите использование прибора, если эти симптомы приобретают более серьезный характер.



Если симптомы не проходят в течение 2-3 дней, обратитесь к врачу.

## 7. План лечения

Стандартный цикл роста волос обычно составляет 18-24 месяцев. В этот период для достижения долгосрочных результатов удаления волос может понадобиться несколько сеансов эпиляции устройством Silk'n Infinity.

Эффективность эпиляции у разных людей может отличаться, в зависимости от участка тела, цвета волос и способа применения эпилятора.

### **Стандартный план удаления волос с помощью эпилятора во время полного цикла роста волос:**

- **Процедуры 1-4:** период между процедурами составляет приблизительно две недели.
- **Процедуры 5-7:** период между процедурами составляет приблизительно четыре недели.
- **Процедуры 8+:** процедуры выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

### **Ожидаемый эффект по удалению волосяного покрова**

Fitzpatrick Тип кожи по шкале Фиц- патрика	Цвет волос	Плотность светового потока [Дж/см <sup>2</sup> ]	Часть тела <sup>2</sup>	Среднее число процедур <sup>1</sup>	% Умень- шения волосяного покрова снижение
I-IV	От светло- корич- невого до корич- невого	2,5-4	Голени или бедро	10-12 сеансов с интервалом примерно в 4 недели.	60%
			Руки		50%
			Область бикини		60%
			Подмышечные впадины		55%
I-IV	От корич- невого до черного	2,5-4	Голени или бедро	8-10 сеансов с интервалом примерно в 4 недели.	70%
			Руки		60%
			Область бикини		70%
			Подмышечные впадины		65%

1. Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также биологических факторов, которые могут повлиять на процесс роста волос. У некоторых пользователей реакция может быть более быстрой или медленной по сравнению со среднестатистическими показателями.

2. Не следует ожидать полного удаления волосяного покрова после одной-двух процедур. Продолжительность периода покоя волосяных фолликулов зависит от участка тела.

## 8. Начало работы

---

### 8.1. Подключите устройство

1. Достаньте устройство и другие его компоненты из коробки.
2. Подсоедините **кабель адаптера** к устройству и включите устройство в электрическую розетку. Все **световые индикаторы уровня энергии** загорятся и будут циклически загораться и гаснуть.



### 8.2. Выполните тест на небольшом участке кожи

Важно повторить этот тест на каждом участке тела, который вы собираетесь обработать. В ходе теста проверяется, возможно ли проведение процедуры для данного цвета кожи, а также устанавливается, является ли выбранный уровень энергии комфортным на данном участке тела. Цвет кожи и уровень энергии могут меняться в зависимости от участка тела.

1. Для проведения теста выполните шаги 1–5 и 7–9, как описано в следующем разделе.
2. Продолжайте тестирование при возрастающих уровнях энергии, пока не дойдете до наивысшего уровня энергии, который не вызывает дискомфорта. Если в течение одного часа вы не почувствуете нежелательных эффектов, можете начать полную процедуру на этом уровне энергии.
3. Повторяйте тест перед обработкой каждой зоны.

### 8.3. Как проводить обработку

1. Перед использованием снимите всю бижутерию.
2. Перед обработкой, кожа должна быть выбритой, чистой и сухой, на ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. **Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их.**
3. Помните о необходимости закрывать татуировки, родинки, бородавки или иные образования на подлежащих обработке участках кожи. Используйте материал, не поглощающий световые лучи, например, белую ткань или белый медицинский пластырь.
4. Нажмите **кнопку управления**. Устройство включится, загорится **световой индикатор** уровня энергии 1, и появится звук работающего вентилятора.
5. Примерно через 1 секунду после нажатия **кнопки управления**, включится зеленый **световой сигнал готовности / предупреждения о цвете кожи**. Теперь устройство готово к использованию на самом низком уровне энергии. Начинать процедуру всегда следует с уровня энергии 1 для вашего первого лечения.
6. Выберите уровень энергии, который не вызывает у вас дискомфорта.
7. Поместите **обрабатываемую поверхность** на кожу и нажмите кнопку **генератора импульсов** для выработки одного импульса. Ваша рука должна касаться **основного электрода** и **генератора импульсов**.
  - Если ваша рука не касается **основного электрода**, гальваническая циркуляция будет отсутствовать.
8. Нажмите кнопку **генератора импульсов**.
  - Сначала устройство автоматически определит цвет вашей кожи. Если цвет кожи достаточно светлый для безопасного использования, устройство активирует гальваническую циркуляцию. Вы можете почувствовать легкое покалывание. Это вполне нормально. Гальванический эффект расширяет кожные поры и способствует лучшему качеству процедуры.
  - Сразу после этого устройство посылает на кожу световой импульс и **индикатор готовности / предупреждения о цвете кожи** выключается. Вы увидите яркую вспышку света и одновременно услышите слабый хлопок, что совершенно нормально при работе устройства. Появится ощущение тепла и легкого покалывания. Устройство тотчас же подзарядится для следующего импульса.

- Через несколько секунд снова загорится **световой сигнал готовности / предупреждения о цвете кожи** и начнет медленно мигать при контакте с кожей.
9. Снимите **обрабатывающую поверхность** с обрабатываемого участка кожи.
  10. Решите, хотите ли вы обработать участок тела методом **скольжения** или **пульсации**. (см. раздел "4.4. Пульсация и скольжение").
    - Если вы выбрали режим **пульсации**, приложите **обрабатывающую поверхность** к соседнему участку кожи и нажмите кнопку генератора импульсов.
    - Если вы выбрали режим **скольжения**, держите кнопку **генератора импульсов** постоянно в нажатом состоянии и плавно водите устройством вдоль обрабатываемой поверхности.
  11. Обработайте весь участок кожи в выбранном режиме **пульсации** или **скольжения**.
-  Старайтесь избегать пропусков или перекрывания обрабатываемых участков.
-  Если на коже начинают появляться волдыри и ожоги, немедленно прекратите процедуру.
12. Завершив процедуру обработки, нажмите и придержите **кнопку управления**, чтобы выключить устройство. Запомните последнюю настройку уровня энергии, которую вы использовали, так как при следующем включении устройство снова начнет с уровня 1.
  13. Отсоедините **адаптер** от электрической розетки, очистите устройство и поместите на хранение в безопасное место (см. раздел "9. Очистка и обслуживание").
  14. После процедуры мы рекомендуем нанести на обработанную кожу лосьон, чтобы кожа быстрее восстановилась.



## 9. Очистка и обслуживание

---

- Отключите устройство от электросети.
- Чтобы очистить устройство (в т.ч., рабочую поверхность), протрите его чистой сухой салфеткой. Никогда не пользуйтесь ацетоном или абразивными жидкостями, поскольку это приведет к порче устройства.
- После чистки, устройство рекомендуется хранить подальше от воды, в упаковке.

⚠ Ни в коем случае не погружайте устройство или его детали в воду.

## 10. Подключение Silk'n Infinity к Bluetooth

---

### **Загрузите приложение Silk'n для удаления волосаного покрова и подключитесь к нему.**

Бесплатное приложение Silk'n для удаления волосаного покрова поддерживает все эпилирующие устройства Silk'n, позволяет вам создать свой персональный план процедур, помогает делать безопасный выбор на основании полученной информации и обеспечивает соблюдение правил для достижения наилучших результатов.

Как владелец Silk'n Infinity вы также можете использовать соединение с помощью Bluetooth. Загрузите приложение, выполните регистрацию и следуйте указаниям для подключения к Bluetooth.

Для бесплатной загрузки приложения Silk'n отсканируйте:



## 11. Выявление и устранение неполадок

Чинить устройство разрешается только квалифицированному персоналу. Не пытайтесь модифицировать, вскрывать или самостоятельно чинить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.

Проблема	Проверка
Устройство не включается.	Убедитесь, что: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>адаптер</b> правильно подсоединен к устройству и что он включен в электрическую розетку.</li></ul>
Отсутствует гальванический импульс при нажатии кнопки <b>генератора импульсов</b> .	Убедитесь, что ваша рука касается <b>основного электрода</b> , когда вы нажимаете кнопку <b>генератора импульсов</b> .  Для гальванической циркуляции, повышающей качество обработки кожи, требуется, чтобы гальванический контур при запуске генератора был замкнут и электрод был одновременно включен.
Отсутствует световой импульс при нажатии кнопки <b>генератора импульсов</b> .	Убедитесь, что: <ul style="list-style-type: none"><li>• зеленый <b>индикатор готовности / предупреждения о цвете кожи</b> медленно мигает, что свидетельствует о хорошем контакте с кожей;</li><li>• что <b>рабочая поверхность</b> равномерно и плотно прижата к коже. В целях безопасности генератор импульсов активирует импульс только если обрабатываемая поверхность плотно прижата к коже.</li></ul> Если вы не видите световых импульсов, а <b>индикатор готовности / предупреждения о цвете кожи</b> быстро мигает, то это говорит о том, что тон вашей кожи, измеренный датчиком цвета кожи, является слишком темным для безопасного использования устройства. Попробуйте применить устройство на другом участке тела или обратитесь в службу поддержки клиентов Silk'n.
Один или более индикаторов постоянно светятся.	Устройство неисправно. Отключите устройство от электрической сети и включите снова. Если устранить проблему не удается, обратитесь в службу обслуживания клиентов.

Проблема	Проверка
Устройство прекратило работу и перешло в режим ожидания.	Для запуска устройства нажмите <b>кнопку управления</b> еще раз.

## 12. Отдел обслуживания клиентов

Для получения дополнительной информации посетите наш вебсайт: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Это руководство также можно загрузить в формате PDF с вебсайта. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов Silk'n, чтобы сообщить о неожиданной работе или деятельности, или любой другой проблеме с устройством. Наша контактная информация:

Страна	Телефонные номера сервисных центров	Эл.почта
Бельгия	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Италия		servizioclientiit@silkn.eu
Нидерланды	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Испания	900 823 302	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Другие страны	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

## 13. Гарантия

Смотрите свой гарантийный талон Silk'n.

## 14. Утилизация



Упаковку следует утилизировать, разобрав ее на части по типу материалов. Картонную коробку следует сдать в макулатуру, а пленку – в пункт вторсырья, занимающийся рециклингом.



Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора. Это обеспечит профессиональную утилизацию и предотвратит попадание вредных веществ\* в окружающую среду. Перед утилизацией убедитесь, что устройство разряжено.




\*Продукты с маркировкой Cd – кадмий, Hg – ртуть, Pb – свинец.


## 15. Технические характеристики

Модель	H3101
Гальванический	70–400 микроампер (мкА)
Размер пятна	0.9см x 3см [2.7см <sup>2</sup> ]
Технология	Усовершенствованный Home Pulsed Light™
Макс. уровень энергии	Макс. 4 Дж/см <sup>2</sup>
Длина волны	475-1200нм
Продолжительность светового импульса	500-800μs
Режим работы	Непрерывный
Работа и безопасность	Датчик цвета кожи гарантирует использование только на соответствующих типах кожи
Частота	Максимум 1,0Гц
Вес системы	225г
Транспортировка и хранение между использованием и условия хранения	Температура: - 40° до +70°C Относительная влажность: от 10% до 90% Атмосферное давление: 500–1060Па

Условия эксплуатации	Температура: от 10°C до 35°C Относительная влажность: от 30% до 75% Атмосферное давление: 700–1060гПа
Время от мин. температуры хранения между использованием до минимальной рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20°C	30 минут
Время от макс. температуры хранения между использованием до макс. рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20°C	30 минут
Защита от поражения электрическим током	Медицинское оборудование, Класс II рабочая часть типа BF
Адаптер	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
	Вход: 100–240 В; 50–60 Гц; 0,9А Выход: 12 В постоянного тока; 3А
Параметры импульса (секунды)	Уровень энергии 1: 0,9 Уровень энергии 2: 1,1 Уровень энергии 3: 1,4 Уровень энергии 4: 1,7 Уровень энергии 5: 2,0

## 16. Обозначения и символы

	Декларация о соответствии: Продукты с такой маркировкой соответствуют всем требованиям Европейской Экономической Зоны.
	Класс II. Адаптер защищен от поражения электрическим током с помощью двойной изоляции.
IP30	Устройство защищено от проникновения предметов, размером более 2,5 мм в диаметре, таких как пальцы, для защиты от поражения электрическим током.
	Не использовать во влажной окружающей среде.
	Не утилизируйте устройство вместе с бытовыми отходами! Утилизация устройства (включая все части и принадлежности) должна осуществляться в соответствии с нормативами по утилизации электроприборов WEEE в соответствующих пунктах сбора.

-  Устройство непригодно к использованию в присутствии воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, кислородом или закисью азота.

## 17. Правовые положения

---

© 2018 Home Skinovations Ltd. Все права сохранены.

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd, является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения.

Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

Silk'n и логотип Silk'n являются зарегистрированными торговыми марками компании Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Box 533, Yokneam 2069206, ИЗРАИЛЬ.



HomeSkinovations™  
contact@silkn.co.il  
www.silkn.co.il